

Prestan catalogus.



Prestan reanimatiepoppen.

Prestan reanimatietorso's zijn verrassend licht, bieden een hoge kwaliteit en zijn relatief voordelig. De reanimatietorso's zijn verkrijgbaar in verschillende modellen en zijn afzonderlijk of in handige multi-packs verkrijgbaar voor klassikale trainingen. Het unieke feedbacksysteem geeft de cursist direct feedback over de compressiefrequentie en -diepte van de hartmassage.

Reanimatietorso's



Prestan volwassene
PP-AM-100M-MS



Prestan kind
PP-CM-100M-MS



Prestan baby
PP-IM-100M-MS

- Realistisch in uiterlijk en borstcompressie.
- Met inventief feedbacksysteem: De poppen geven door middel van een kliksysteem en lichtsignalen de juiste diepte en frequentie aan.
- Cursist krijgt direct feedback zonder gebruik van Apps of andere systemen.
- Eenvoudig te transporteren en gebruiksklaar te maken.
- Verkrijgbaar met 'Jaw Thrust'-hoofd. Hiermee kan de cursist leren de kaak te liften en de luchtweg vrij te maken.
- Longzakjes en Faceshields zijn eenvoudig te vervangen.
- In drie verschillende modellen verkrijgbaar: volwassene, kind en baby.
- Uitgerust met het nieuwste reanimatieprotocol.
- Perfect te gebruiken in combinatie met de Prestan AED Trainer Plus of Prestan AED UltraTrainer.

4-packs



Prestan volwassene 4-pack
PP-AM-400M-MS



Prestan kind 4-pack
PP-CM-400M-MS



Prestan baby 4-pack
PP-IM-400M-MS

Prestan reanimatiepoppen.

Diversity kits

Prestan Diversity kits bestaan uit een mix van twee blanke en twee donkerkleurige poppen in één handige draagtas. Diversity Kits zijn verkrijgbaar als 4-pack volwassene, kind en baby met een uniek feedbacksysteem voor directe feedback over de compressiefrequentie en diepte van de hartmassage.



Prestan Diversity kit volwassene 4-pack
PP-AM-400M-MSDS



Prestan Diversity kit kind 4-pack
PP-CM-400-MSDS



Prestan Diversity kit baby 4-pack
PP-IM-400M-MSDS

Prestan reanimatiepoppen.

Collectionpack



Prestan Collectionpack
(1 baby / 1 kind / 1 volwassene)
PP-FM-300M-MS

Familypack




Prestan Familypack
2 baby's / 1 kind / 2 volwassene
PP-FM-500M-MS

Uniek feedbacksysteem

De unieke reanimatiemonitor van Prestan geeft onmiddellijke feedback over de snelheid van de hartmassage. De lampjes in de schouder van de torso signaleren continue de voortgang van de reanimatiesnelheid. Als het gele lampje knippert is de bovengrens van 120 compressies per minuut overschreden en dient de cursist de snelheid aan te passen. Tevens kunnen instructeurs op afstand snel en eenvoudig meerdere cursisten volgen.

Cursisten kunnen er ook op vertrouwen dat ze tot de juiste diepte reanimeren. Het unieke klikkermechanisme geeft een hoorbare bevestiging wanneer de juiste compressiediepte tussen de 5-6 cm is bereikt.

Beide feedbackfuncties kunnen worden uitgeschakeld bij het afnemen van examens.

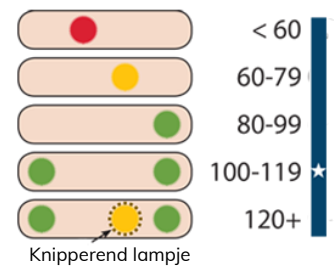

Feedbackmonitor


Upgrade eenvoudig uw huidige Prestan reanimatietorso of installeer de feedbackmonitor in oefenpoppen die oorspronkelijk zonder feedbackmonitor gekocht zijn.



Feedbackmonitor voor Prestan reanimatietorso volwassene, kind en baby (2015 richtlijnen)
Volwassene: RPP-AMON-1 Kind: RPP-CMON-1
Baby: RPP-IMON-1

Jaw Thrust hoofd

Prestan's Jaw Thrust hoofd biedt cursisten de mogelijkheid om de kaaklift te oefenen en hiermee de luchtweg vrij te maken.

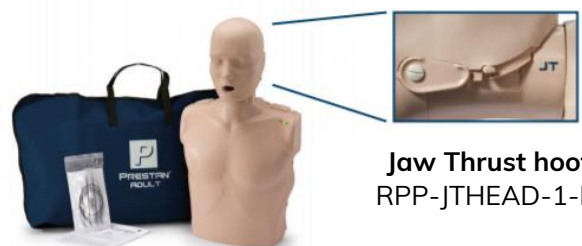

Jaw Thrust hoofd
RPP-JTHEAD-1-MS

Prestan reanimatietorso volwassene Jaw-Thrust
PP-JTM-100M-MS


Prestan 2000 serie.

De Prestan volwassene 2000 Serie biedt naast de directe visuele feedback (lichtjes in de schouder) geavanceerde feedback via de Prestan CPR Feedback-app. Door de uitgebreide feedbackfuncties is de reanimatiepop zowel geschikt voor Basic Life Support als Advanced Life Support trainingen.



Prestan Volwassene 2000 serie
Single pack: PP-AM-2000-1-MS

Prestan Volwassene 2000 serie
4-pack: PP-AM-2000-4-MS

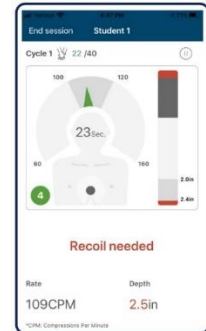

De Prestan CPR Feedback-app meet:

- Snelheid
- Diepte
- Terugslag
- Ventilatie
- hands-off tijd

Download de gratis
Prestan CPR Feedback-
App via de App-store en
Apple app store.



Add-On Kit



Upgrade reanimatietorso's
vanaf bouwjaar 2018 naar een
Prestan 2000 serie.

Prestan Add-On Kit
RPP-AAOK2000-1



Longzakjes 2000 serie

De longzakjes 2000 serie zijn
net zo eenvoudig te installeren
als de andere longen. Deze
longzakjes hebben een
beademingssensor welke nodig
is voor beademingsfeedback via
de Prestan CPR Feedback-app.



Longzakjes 2000 serie
10 stuks: PP-VALB-10
50 stuks: PP-VALB-50

Prestan reanimatiepoppen Ultralite.

Prestan Ultralite oefentorso's zijn stapelbaar en hebben een lichtgewicht waardoor u eenvoudig meerdere poppen tegelijk kunt meenemen en op een zeer efficiënte wijze kunt lesgeven. Door het juist inblazen van de lucht zal de borstkas van de torso zichtbaar omhooggaan. Het optionele feedbacksysteem geeft de cursist direct feedback over de compressiefrequentie en -diepte van de hartmassage. Met de verwisselbare longen en faceshields kunnen beademingen hygiënisch toegepast worden.

Kenmerken

- Stapelbare torso's en hoofden vormen een compact pakket voor het vervoeren van meerdere eenheden (4-pack/12-pack)
- Geschikt voor training van grote groepen
- Realistisch in uiterlijk en borstcompressie
- Eenvoudig gebruiksklaar te maken en gemakkelijk schoon te houden
- Realistische hoofdkanteling om de luchtweg te openen
- Zichtbare borsthoogte bij het inblazen van lucht (bij gebruik van longzak)
- Optioneel feedbacksysteem: De poppen geven door middel van een kliksysteem en lichtsignalen de juiste diepte en frequentie aan
- Longzakjes en Faceshields zijn eenvoudig te verwisselen en te vervangen
- 3 jaar fabrieksgarantie



Ultralite Piston met CPR Feedback
RPP-ULPISTONM-1-MS
RPP-ULPISTONM-4-MS

Ultralite 4-pack



Prestan Ultralite 4-pack
Zonder feedback: PP-ULM-400-MS
Met feedback: PP-ULM-400M-MS

Ultralite 12-pack



Prestan Ultralite 12-pack
Zonder feedback: PP-ULM-1200-MS
Met feedback: PP-ULM-1200M-MS

Prestan Ultralite Baby.

De Ultralite baby oefenpop is een lichtgewicht en betaalbare oplossing voor training van meerdere cursisten tegelijk. Elke cursist kan gebruik maken van zijn/haar eigen baby oefenpop.

- Uniek feedbacksysteem geeft cursist feedback over de compressiefrequentie en diepte van de hartmassage.
- Lichtgewicht met snelle en eenvoudige installatie
- Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden
- Verkrijgbaar in medium of donkere huidskleur



Prestan Ultralite Baby,
PP-IULM-100M-MS
PP-IULM-100M-DS



Prestan Ultralite Baby, 4-pack
PP-IULM-400M-MS
PP-IULM-400M-DS



**Prestan Ultralite Baby,
Diversity Kit, 4-pack**
PP-IULM-400M-MSDS
(2 medium, 2 donkere huidskleur)



Prestan Ultralite Baby, 12 pack
PP-IULM-1200M-MS
PP-IULM-1200M-DS



**Prestan Ultralite Baby,
Diversity Kit, 12 pack**
PP-IULM-1200M-MSDS
(6 medium huidskleur & 6 donkere huidskleur)

Prestan Ultralite Baby.



Prestan Baby Ultralite, 4-pack
Lichtgewicht en gemakkelijk te vervoeren.
(gewicht: 2,6 kilo)



Prestan Baby Ultralite, single pack
Handige draagtas met Ultralite Baby
reanimatiepop. (gewicht: 750 gram)



Prestan Baby Ultralite, 12-pack
12 baby reanimatiepoppen in één handige draagtas.
(gewicht: 7 kilo)

Prestan AED Trainers.

Prestan Professional AED Trainer Plus



De universele AED Trainer Plus is een eenvoudig te bedienen en hoogkwalitatief apparaat voor een betaalbare prijs. De afmeting en het gewicht zijn vergelijkbaar met een echte AED voor een realistische trainingsservaring. Protocollen kunnen zowel met als zonder afstandsbediening worden ingesteld.

Optioneel: afstandsbediening PP-AEDT2-100-R

- Volume, taal en scenario keuze
- Spelen, pauze en stoppen
- Instructie 'pads bevestigen' en 'druk dieper' tijdens reanimatie
- In staat om meerdere AED-Trainers tegelijk te bedienen



Prestan professional AED Trainer Plus

PP-AEDT2-103 (Nederlands/Engels)
PP-AEDT2-102 (Frans/Engels)
PP-AEDT2-108 (Duits/Engels)
PP-AEDT2-403 (4-pack, Nederlands/Engels)
PP-AEDT2-402 (4-pack, Frans/Engels)
PP-AEDT2-408 (4-pack, Duits/Engels)

Ook in andere taalcombinaties leverbaar.

Prestan AED UltraTrainer

De Prestan AED Ultratrainer biedt door de vele instelbare opties een zeer waardevolle toevoeging aan iedere reanimatie en AED-training. Naast de volwassenmodus (30:2 protocol) heeft de Prestan AED UltraTrainer onder andere een kindermodus met 15:2 reanimatieprotocol.

Prestan AED UltraTrainer

PP-AEDUT-103 (Nederlands/Engels)
PP-AEDUT-102 (Frans/Engels)
PP-AEDUT-108 (Duits/Engels)
PP-AEDUT-403 (4-pack, Nederlands/Engels)
PP-AEDUT-402 (4-pack, Frans/Engels)
PP-AEDUT-408 (4-pack, Duits/Engels)

Ook in andere taalcombinaties leverbaar.



Prestan AED Trainers - eigenschappen.

De AED Trainer PLUS en de AED UltraTrainer bieden uitgebreide opties. Door de meest recente technologie te combineren met realistische functies kunnen deze AED-Trainers de werking van bijna ieder type AED nabootsen. Dit maakt de Prestan AED Trainers zeer geschikt voor instructeurs die op veel verschillende locaties met verschillende typen AED's oefenen.

Beide AED Trainers zijn uitgerust met unieke eigenschappen

- Hoorbare en gemakkelijk te volgen instructies
- CPR feedback/coaching
- Gemakkelijk te wisselen tussen twee talen
- Bediening van taalkeuze, scenario's, volumeregeling en pauzemogelijkheid
- Zowel instelbaar als volwassen modus 30:2 en baby-/kindermodus 15:2
- Te gebruiken als semi- en volautomaat
- Inclusief 5 schok-scenario's
- Reanimatiemetronoom (aan/uit)
- Beademingsinstructie (aan/uit)
- De Prestan Trainer is ingesteld volgens de laatste richtlijnen
- Wanneer de richtlijnen wijzigen hoeft alleen de module vervangen te worden
- De fabrieksgarantie van de Prestan AED Trainers is 3 jaar.

Trainingselektroden hebben een Pad Sensing System

- Trainingselektroden zijn vooraf aangesloten en direct klaar voor gebruik.
- De elektroden hebben een ingebouwde schakelaar (Pad Sensing System) die geactiveerd wordt wanneer de trainingselektroden zijn bevestigd op de pop. Hierdoor gaat de AED-Trainer automatisch verder in het protocol.
- Lijm op siliconen in combinatie met de schuimstructuur zorgen ervoor dat de elektroden gemakkelijk bevestigd en verwijderd kunnen worden.
- Te gebruiken op alle reanimatie oefenpoppen
- Kan gebruikt worden om te trainen voor volwassen en kinderreanimatie.



Prestan onderdelen en accessoires.

Verbruiksartikelen




Prestan Longzakjes

Volwassene 50 stuks: PP-ALB-50
 Kind 50 stuks: PP-CLB-50
 Baby 50 stuks: PP-ILB-50
 Ultralite 50 stuks: PP-ULB-50
 2000 serie 10 stuks: PP-VALB-10
 2000 serie 50 stuks: PP-VALB-50



Prestan Faceshields

Volwassene 50 stuks: PP-AFS-50
 Kind 50 stuks: PP-CFS-50
 Baby 50 stuks: PP-IFS-50
 Ultralite 50 stuks: PP-UFS-50

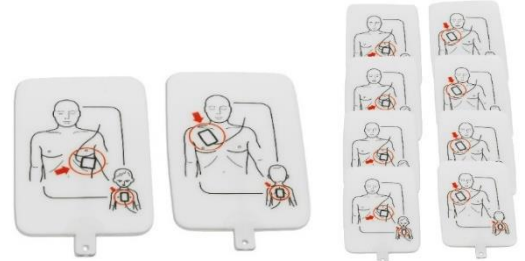

Trainingselektroden voor de AED Trainer PLUS en AED UltraTrainer

1 set: PP-UTPAD-1
 4 sets: PP-UTPAD-4

Vervangende kabels



AED Trainer PLUS:
RPP-AEDT2-CABLE



AED UltraTrainer:
RPP-AEDUT-CABLE

Toebehoren



CPR-kniekussens

4 sets: PP-KPAD-4
 12 sets: PP-KPAD-12
 24 sets: PP-KPAD-24

Vest CPR-training
 Volwassene/kind/Ultralite:
 1 stuk: PP-ACSHIRT-1
 4 stuks PP-ACSHIRT-4

Baby:
 1 stuk: PP-ISHIRT-1
 4 stuks: PP-ISHIRT-4



Female Accessory 4-pack

Medium skin 4-pack: PP-AFS-50
 Dark skin 4-pack: PP-CFS-50

Ontworpen om:

- De dialoog aan te moedigen
- Barrières te doorbreken
- Gendervooroordelen bij reanimatietoediening en -training te elimineren.



*In deze catalogus zijn niet alle vervangende onderdelen en accessoires vermeld.
 Mist u iets? Bekijk onze prijslijst of bestel de onderdelen via onze website.*