

**Prestan catalogus.**  
**2020**



# Prestan reanimatiepoppen.

Prestan reanimatietorso's zijn verrassend licht, bieden een hoge kwaliteit en zijn relatief voordelig. De reanimatietorso's zijn verkrijgbaar in verschillende modellen en zijn afzonderlijk of in handige multi-packs verkrijgbaar voor klassikale trainingen. Het unieke feedbacksysteem geeft de cursist direct feedback over de compressiefrequentie en -diepte van de hartmassage.

## Reanimatietorso's



**Prestan volwassene**  
PP-AM-100M-MS



**Prestan kind**  
PP-CM-100M-MS



**Prestan baby**  
PP-IM-100M-MS

- Realistisch in uiterlijk en borstcompressie.
- Met inventief feedbacksysteem: De poppen geven door middel van een kliksysteem en lichtsignalen de juiste diepte en frequentie aan.
- Cursist krijgt direct feedback zonder gebruik van Apps of andere systemen.
- Eenvoudig te transporteren en gebruiksklaar te maken.
- Verkrijgbaar met 'Jaw Thrust'-hoofd. Hiermee kan de cursist leren de kaak te liften en de luchtweg vrij te maken.
- Longzakjes en Faceshields zijn eenvoudig te vervangen.
- In drie verschillende modellen verkrijgbaar: volwassene, kind en baby.
- Uitgerust met het nieuwste reanimatieprotocol.
- Perfect te gebruiken in combinatie met de Prestan AED Trainer Plus of Prestan AED UltraTrainer.

## 4-packs



**Prestan volwassene 4-pack**  
PP-AM-400M-MS



**Prestan kind 4-pack**  
PP-CM-400M-MS



**Prestan baby 4-pack**  
PP-IM-400M-MS

# Prestan reanimatiepoppen.

## Collectionpack



**Prestan Collectionpack**  
(1 baby / 1 kind / 1 volwassene)  
PP-FM-300M-MS

## Familypack




**Prestan Familypack**  
2 baby's / 1 kind / 2 volwassene  
PP-FM-500M-MS

## Uniek feedbacksysteem

De unieke reanimatiemonitor van Prestan geeft onmiddellijke feedback over de snelheid van de hartmassage. De lampjes in de schouder van de torso signaleren continue de voortgang van de reanimatiesnelheid. Als het gele lampje knippert is de bovengrens van 120 compressies per minuut overschreden en dient de cursist de snelheid aan te passen. Tevens kunnen instructeurs op afstand snel en eenvoudig meerdere cursisten volgen.

Cursisten kunnen er ook op vertrouwen dat ze tot de juiste diepte reanimeren. Het unieke klikkermechanisme geeft een hoorbare bevestiging wanneer de juiste compressiediepte tussen de 5-6 cm is bereikt.

*Beide feedbackfuncties kunnen worden uitgeschakeld bij het afnemen van examens.*

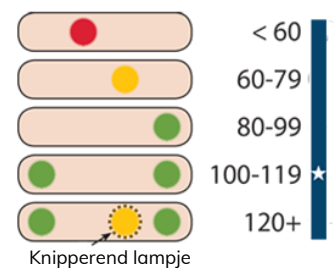

## Feedbackmonitor

Upgrade eenvoudig uw huidige Prestan reanimatietorso of installeer de feedbackmonitor in oefenpoppen die oorspronkelijk zonder feedbackmonitor gekocht zijn.



**Feedbackmonitor** voor Prestan reanimatietorso volwassene, kind en baby (2015 richtlijnen)  
Volwassene: RPP-AMON-1 Kind: RPP-CMON-1  
Baby: RPP-IMON-1

## Jaw Thrust hoofd

Prestan's Jaw Thrust hoofd biedt cursisten de mogelijkheid om de kaaklift te oefenen en hiermee de luchtweg vrij te maken.



**Jaw Thrust hoofd**  
RPP-JTHEAD-1-MS

**Prestan reanimatietorso volwassene Jaw-Thrust**  
PP-JTM-100M-MS

# Prestan Ultralite.

Prestan Ultralite oefentorso's zijn stapelbaar en hebben een lichtgewicht waardoor u eenvoudig meerdere poppen tegelijk kunt meenemen en op een zeer efficiënte wijze kunt lesgeven. Door het juist inblazen van de lucht zal de borstkas van de torso zichtbaar omhooggaan. Het optionele feedbacksysteem geeft de cursist direct feedback over de compressiefrequentie en -diepte van de hartmassage. Met de verwisselbare longen en faceshields kunnen beademingen hygiënisch toegepast worden.

## Kenmerken

- Stapelbare torso's en hoofden vormen een compact pakket voor het vervoeren van meerdere eenheden (4-pack/12-pack)
- Geschikt voor training van grote groepen
- Realistisch in uiterlijk en borstcompressie
- Eenvoudig gebruiksklaar te maken en gemakkelijk schoon te houden
- Realistische hoofdkanteling om de luchtweg te openen
- Zichtbare borsthoogte bij het inblazen van lucht (bij gebruik van longzak)
- Optioneel feedbacksysteem: De poppen geven door middel van een kliksysteem en lichtsignalen de juiste diepte en frequentie aan
- Longzakjes en Faceshields zijn eenvoudig te verwisselen en te vervangen
- 3 jaar fabrieksgarantie



## Ultralite 4-pack



**Prestan Ultralite 4-pack**  
Zonder feedback: PP-ULM-400-MS  
Met feedback: PP-ULM-400M-MS

## Ultralite 12-pack



**Prestan Ultralite 12-pack**  
Zonder feedback PP-ULM-1200-MS  
Met feedback: PP-ULM-1200M-MS

# Prestan AED Trainers.

## Prestan Professional AED Trainer Plus



De universele AED Trainer Plus is een eenvoudig te bedienen en hoogkwalitatief apparaat voor een betaalbare prijs. De afmeting en het gewicht zijn vergelijkbaar met een echte AED voor een realistische trainingservaring. Protocollen kunnen zowel met als zonder afstandsbediening worden ingesteld.

**Optioneel: afstandsbediening**  
PP-AEDT2-100-R

- Volume, taal en scenario keuze
- Spelen, pauze en stoppen
- Instructie 'pads bevestigen' en 'druk dieper' tijdens reanimatie
- In staat om meerdere AED-Trainers tegelijk te bedienen



### **Prestan professional AED Trainer Plus**

PP-AEDT2-103 (Nederlands/Engels)  
PP-AEDT2-102 (Frans/Engels)  
PP-AEDT2-108 (Duits/Engels)  
PP-AEDT2-403 (4-pack, Nederlands/Engels)  
PP-AEDT2-402 (4-pack, Frans/Engels)  
PP-AEDT2-408 (4-pack, Duits/Engels)

*Ook in andere taalcombinaties leverbaar.*

## Prestan AED UltraTrainer

De Prestan AED Ultratrainer biedt door de vele instelbare opties een zeer waardevolle toevoeging aan iedere reanimatie en AED-training. Naast de volwassenmodus (30:2 protocol) heeft de Prestan AED UltraTrainer onder andere een kindermodus met 15:2 reanimatieprotocol.

### **Prestan AED UltraTrainer**

PP-AEDUT-103 (Nederlands/Engels)  
PP-AEDUT-102 (Frans/Engels)  
PP-AEDUT-108 (Duits/Engels)  
PP-AEDUT-403 (4-pack, Nederlands/Engels)  
PP-AEDUT-402 (4-pack, Frans/Engels)  
PP-AEDUT-408 (4-pack, Duits/Engels)

*Ook in andere taalcombinaties leverbaar.*



# Prestan AED Trainers - eigenschappen.


De AED Trainer PLUS en de AED UltraTrainer bieden uitgebreide opties. Door de meest recente technologie te combineren met realistische functies kunnen deze AED-Trainers de werking van bijna ieder type AED nabootsen. Dit maakt de Prestan AED Trainers zeer geschikt voor instructeurs die op veel verschillende locaties met verschillende typen AED's oefenen.

## Beide AED Trainers zijn uitgerust met unieke eigenschappen

- Hoorbare en gemakkelijk te volgen instructies
- CPR feedback/coaching
- Gemakkelijk te wisselen tussen twee talen
- Bediening van taalkeuze, scenario's, volumeregeling en pauzemogelijkheid
- Zowel instelbaar als volwassen modus 30:2 en baby-/kindermodus 15:2
- Te gebruiken als semi- en volautomaat
- Inclusief 5 schok-scenario's
- Reanimatiemetronoom (aan/uit)
- Beademingsinstructie (aan/uit)
- De Prestan Trainer is ingesteld volgens de laatste richtlijnen
- Wanneer de richtlijnen wijzigen hoeft alleen de module vervangen te worden
- De fabrieksgarantie van de Prestan AED Trainers is 3 jaar.

## Trainingselektroden hebben een Pad Sensing System

- Trainingselektroden zijn vooraf aangesloten en direct klaar voor gebruik.
- De elektroden hebben een ingebouwde schakelaar (Pad Sensing System) die geactiveerd wordt wanneer de trainingselektroden zijn bevestigd op de pop. Hierdoor gaat de AED-Trainer automatisch verder in het protocol.
- Lijm op siliconen in combinatie met de schuimstructuur zorgen ervoor dat de elektroden gemakkelijk bevestigd en verwijderd kunnen worden.
- Te gebruiken op alle reanimatie oefenpoppen
- Kan gebruikt worden om te trainen voor volwassen en kinderreanimatie.

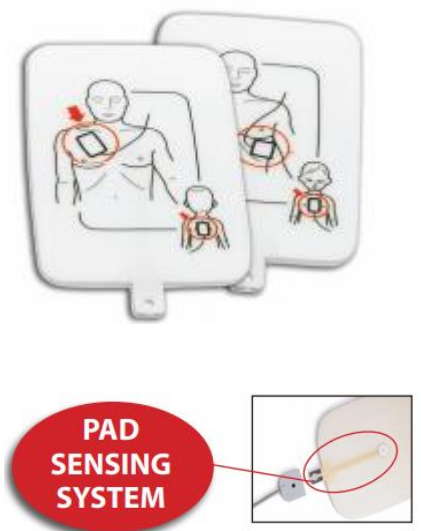

# Prestan onderdelen en accessoires.

Plan vooruit en zorg dat u altijd voldoende Prestan verbruiksmaterialen op voorraad heeft voor het geven van trainingen.

## Voor uw reanimatietorso's



### Prestan Longzakjes

Volwassene 50 stuks: PP-ALB-50

Kind 50 stuks: PP-CLB-50

Baby 50 stuks: PP-ILB-50

Ultralite 50 stuks: PP-ULB-50



### Prestan Faceshields


Volwassene 50 stuks: PP-AFS-50

Kind 50 stuks: PP-CFS-50

Baby 50 stuks: PP-IFS-50

Ultralite 50 stuks: PP-UFS-50


## Voor uw AED-Trainers

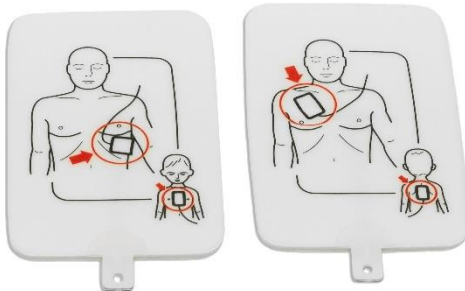

### Trainingselektroden voor de AED Trainer PLUS en AED UltraTrainer

1 set: PP-UTPAD-1

4 sets: PP-UTPAD-4

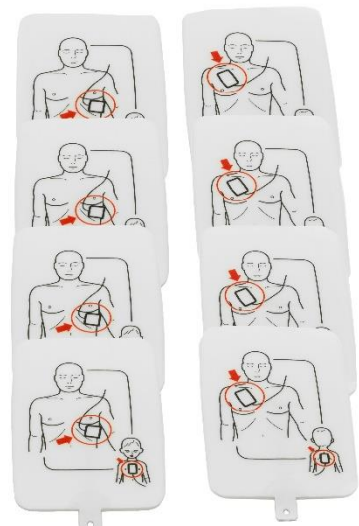

### Vervangende kabels



**AED Trainer PLUS:**  
RPP-AEDT2-CABLE



**AED UltraTrainer:**  
RPP-AEDUT-CABLE

*In deze catalogus zijn niet alle vervangende onderdelen en accessoires vermeld.  
Mist u iets? Neem contact met ons op of bestel de onderdelen via onze website.*